


RAZBIJAČ STANICA
Braun Melsungen
Model MSK

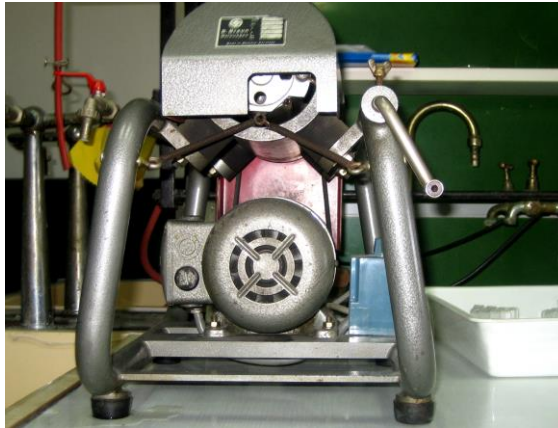

Kratki opis metode

Uređaj služi za mehaničko razbijanje stanica mikroorganizama. Stanice mikroorganizama se razbijaju staklenim kuglicama promjera 0,5 mm, uz obavezno hlađenje s CO_2 .

Namjena

Uređaj služi za mehaničko razbijanje stanica mikroorganizama.

Tehničke značajke

Frekvencija vibracija uređaja je 2000 - 4000 min^{-1} . Tijekom razbijanja stanična suspenzija se hladi pomoću CO_2 .

Tip i priprema uzorka

Stanice se suspendiraju u odgovarajućem puferu te se u suspenziju dodaju staklene kuglice.